

特殊型車いす

Special Type model

MOKURIN	87
Nツアラー	88
NAH-207 / スタンドアップチェア	90



スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

シニア
ウルトラ
シリーズ

座王X座王
シリーズ

軽量車いす

テイル
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護・
福祉用具

ストレッチャー！
防災用品
カートなど

車いす
オプション
パーツ

室内用6輪車いす

モクリン

MOKURIN

補装具車椅子
レディメイド

心身に優しく温かい木材を使用した室内用車いす。
6輪構造で移動しやすく安全。
座りごこちも快適です。



座王Xでも採用の
オートフィット3Dバックサポート。
インナーベルトの伸縮で
自動的に身体にフィットします。

(オートフィットシステムにつきましては
P39でご確認ください)



ノーパンクタイヤ
エアリ[〜]
装備



いつでも空気が
いっぱい
感覚で安心

PHOTO/オプション仕様
シートカラー: グリーン
オプション: 介助ブレーキ
参考重量: 約16.9kg(座クッション含まず)

PHOTO/オプション仕様
シートカラー: ブルー
オプション: 介助ブレーキ



PHOTO/オプション仕様
シートカラー: ボルドー
オプション: 介助ブレーキ

MOKURIN (モクリン)

基本価格 **308,000円**(非課税)

自走用

仕様詳細

耐100kg

- 全長: 86cm ●全高: 88cm
 - 全幅: 58cm (介助ブレーキつき仕様は59cm)
 - 前座高: 42cm ●後座高: 38.5cm
 - シート幅: 40cm ●シート奥行: 38cm
 - バックサポート高 (座板上面から): 45cm
 - アームサポート高 (座板上面から): 前23cm・奥25cm
 - 前輪キャスタ: 5インチPU
 - 駆動輪: 20インチ (25-451) ノーパンク (エアリ)
 - 後方キャスタ: 3インチ
 - 座クッション厚さ: 5cm
 - フレーム材質: アルミ軽合金、木材 (フナ)
 - 重量: 16.0kg (介助ブレーキつき仕様は16.9kg)
- ※バックサポート高・アームサポート高・重量は座クッション未装着時のものです。

■シートカラー (基本色)



ブルー グリーン ボルドー

ご注文時には、シートカラーをご指定ください。

オプション

介助ブレーキ (コンパクトドラムブレーキ)

新車注文時加算額 **22,300円**(非課税)

スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

シニア
ウルトラ
シリーズ

座王X
シリーズ

軽量車いす

テルト
リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スチール製
スタンダード
車いす

介護・
福祉用具

ストレッチャー!
防災用品
カートなど

車いす
オプション

自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす

エヌ

TOURER **Nツアラー**

補装具車椅子
レディメイド

車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に。
安心感にもつながる、快適な移動。



オプション
着脱式ヘッドサポート

日常用の
車いすとして
使用

車いす移動車
の乗降・固定
にも便利



ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ
標準装備



自走用
NA-NT2W
オプション仕様
重量:16.3kg

高い安全性

NA-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)及び
NAH-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)は
コンソーシアムガイドラインに基づき、車載車椅子の
国際規格ISO7176-19(20Gスレッド試験)準拠確認
済みです。

車椅子簡易固定システム対応※アンカーバー
※車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドラインに準拠しています

Nツアラー(NA-NT2W・NAH-NT2W)は、
車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドライン
に準拠しています。

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムとは

車椅子・車いす移動車・バスを開発製造するメーカー等が協力し、「車椅子の
自動車等へのワンタッチ固定装置に関する規格化」に沿った車椅子簡易固定
システム対応機器類を極力早期に開発、市場投入が出来るよう、またより多く
のご利用者様に新しい規格とそのメリットを知っていただけるよう、連携活
動するためのプラットフォームです。

一般的な車いすと
ほとんどかわらない
使用感。
折りたたみも
可能です。



自走用
NA-NT2W
標準仕様
重量:15.2kg

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式

車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。



※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例

簡単 便利

車椅子簡易固定システム
対応アンダーバー



※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例



ワンタッチ固定式ではない、従来の
ワイヤーフック固定式の車いす
移動車にも乗降できます。
※フレームにはフック固定位置を示す
マークがついています。


NA-NT2W

00175-000428

耐100kg 166,000円(非課税) 自走用



跳ね上げ式アームサポート。
開き式・着脱式フット・レッグサポート。

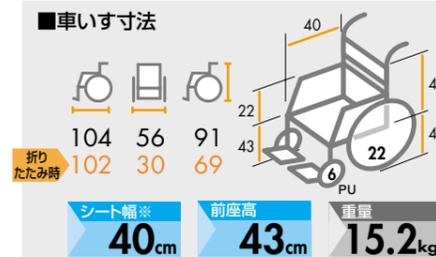

補装具車椅子
レディメイド

フットサポート・
シート間距離
調節式
34-36-38cm



ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ
標準装備



NAH-NT2W

00175-000429

耐100kg 166,000円(非課税) 介助用



跳ね上げ式アームサポート。
開き式・着脱式フット・レッグサポート。



補装具車椅子
レディメイド

フットサポート・
シート間距離
調節式
34-36-38cm



ノーバンク
(ハイポリマー)
タイヤ
標準装備



サイドガード

車いす移動車のシートベルトを
通すための穴が開いています。



サイドガードの穴を通すことによりシートベ
ルトを腰部に適切にかけることができます。



自走用のNA-NT2Wでも、サイドガードの穴と
隙間の広いブラホイールを通してシートベルト
を適切かつ容易に装着できます。

オプション

着脱式ヘッドサポート
新車注文時
10,750円(非課税)
ヘッドサポート高:63~84cm
重量:未装着車いすより1.1kg増加



ヘッドサポート高は、
ノブで調整式です。



ヘッドサポートが必要な場合は
簡単にはずすことができます。

着脱式ヘッドサポートつきオプション仕様のTAISコード
●NA-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000430
●NAH-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000431

スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

シニア
シニア

シニア
シニア

軽量車いす

リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スタンダード
車いす

介護
福祉用具

ストレッチャー！
防災用品
カートなど

車いす
オプション
パーツ

携帯車いす

NAH-207



足踏み
ブレーキ

いつでもどこでも、ワンタッチ操作!
超軽量・超コンパクトわずか **5.5kg**
外出先・旅行先での移動、スペースの狭い場所での
移動等、通常の車いすの補助的な役割をする
車いすとしてご利用ください。

NAH-207

基本価格 **118,800円**(非課税)

介助用

00175-000007

耐100kg


■シートカラー
(基本色)



黒

赤

ご注文時には、シートカラーをご指定ください。

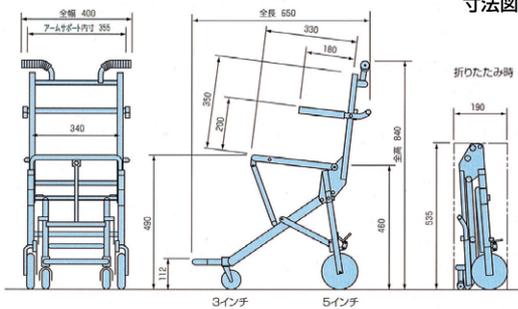

折りたたみ時

●この製品は、神奈川県及び神奈川県総合リハビリテーションセンターが実施した「高齢者・障害者へのヒューマンテクノロジー応用研究」の成果により開発したものです。

- 新幹線・バス等の狭い通路での取り扱いが容易です。
- 縦、横、高さの和が115cm未満の非常にコンパクトな車いすになっております。自動車のトランク等への出し入れが簡単で、保管場所も小スペースで済みます。
- アームサポートがはね上げ式になっており、よりスムーズな乗り移りができます。
- 介助する方の利便性を考え、主輪には足踏みブレーキ式を取り付けてあります。
- 座位の安定を保つ為の、大腿ベルトが標準装備されています。

オプション

キャリーバッグ
保管及び持ち運びに便利です。
税込価格 **17,600円**(本体価格 16,000円)



起立機構つき車いす

スタンダップチェア

リハビリに最適。

補装具車椅子

レディメイド

目線を高く、高所に手が届く。
リフトアップ(起立機構)で下肢に障がいのある方でも
容易に立ち上がる事が可能です。

スタンダップチェア

基本価格 **323,400円**(非課税)


自走用

仕様詳細

- 重量：19.4kg(クッションなしでの重量)
- 材質：アルミ軽合金
- ソフトクッション：8cm厚
- 胸ベルト：マジック合わせ式
- 膝ベルト：パッド付

(座シートはあらかじめゆるめに張ってあります。使用される場合は必ずクッションをお使いください。)

- ▲ 適応身長160cm～175cm
- ▲ 起立動作は、足、膝、腰に無理な負担がかかっていないかを確認しながら行ってください。
- ▲ 製品選定に際しては、身体状況を充分考慮の上、適合について事前に専門のセラピストにご相談ください。

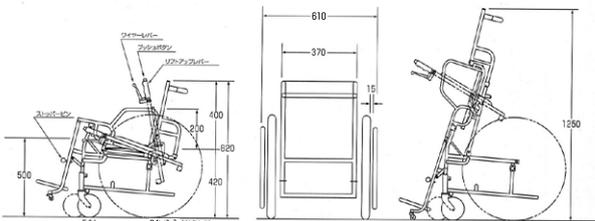

■シートカラー
(基本色)



NM-8



起立時



左右のリフトアップレバーを操作して起立(スタンダップ)します。