

スポーツ
競技用モデル

アクティブ
モデル

シニア
シニア
シニア

座王X座王
シリーズ

軽量車いす

リクライニング
車いす

座位保持

キッズモデル

電動車いす

特殊型車いす

アルミ製
スタンダード
車いす

スタンダード
車いす

介護
福祉用具

ストレッチャー
防災用品
カートなど

車いす
オプション
パーツ

ジーガードII G-GuardII

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る
車いす自動安全
ブレーキオプション

G-Guard-II (ジーガードツー) 00175-000333

新車取付時 **72,600円** (非課税)
(1台分)

G-Guard-II 装着可能車いす
NEO-1 (P102) ・ NEO-1W (P102)

乗車時の転倒防止!

万一のブレーキの
かけ忘れも安心!



着座時の後退防止!

ドーンと座っても
安心!



PHOTO/NEO-1
G-Guard-II装着仕様
参考重量: 15.9kg



立ち上がったら自動的に駆動輪をロック

乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。



乗車者が立ち上がった瞬間、自動で安全ブレーキが安全を確保!



乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を少し動かすと、ロックが解除されます。



車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。



ご注意

- G-Guard-IIの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保のための機構です。G-Guard-II装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
- 座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-Guard-IIの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

G-Guard-II(ジーガードツー)を人気のスタンダード車いすに装備したパッケージモデルをご用意しています。

ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ装備のスタンダード車いすにG-Guard-IIを装着しました。


補装具車椅子
NEO-1 レディメイド 146,300円 (非課税)
+G-Guard-IIパッケージ

00175-000329

耐100kg 自走用



車いす寸法

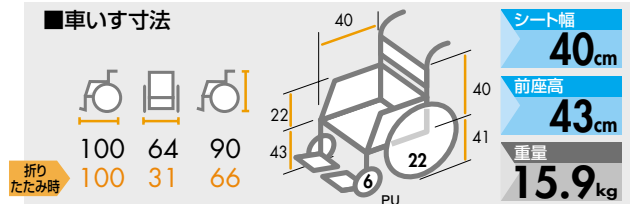

NEO-1につきましては、P102をご覧ください。



ノーバンク(ハイポリマー)タイヤ