

自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす



TOURER

Nツアラー

エヌ


車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に。
安心感にもつながる、快適な移動。

オプション

着脱式ヘッドサポート

日常用の
車いすとして
使用

車いす移動車
の乗降・固定
にも便利

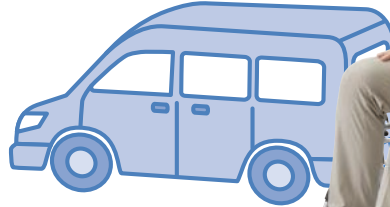

自走用

NA-NT2W

オプション仕様
重量：16.3kg

ノーパンク
(ハイポリマー)
タイヤ
標準装備



高い
安全性

NA-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)及び
NAH-NT2W(ヘッドサポートつきオプション仕様)は
コンソーシアムガイドラインに基づき、車載車椅子の国際規格
ISO7176-19(20Gスレッド試験)準拠確認済です。

車椅子簡易固定システム対応アンカーバー

※車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドラインに準拠しています。

一般的な車いすとほとんどかわらない使用感。
折りたたみも可能です。

Nツアラー(NA-NT2W・NAH-NT2W)は、
車椅子簡易固定標準化コンソーシアムガイドライン
に準拠しています。

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムとは

車椅子・車いす移動車・バスを開発製造するメーカー等が協力し、「車椅子の自動車等へのワンタッチ固定機器に関する規格化」に沿った車椅子簡易固定システム対応機器類を極力早期に開発、市場投入が出来るよう、またより多くのご利用者様に新しい規格とそのメリットを知っていただけるよう、連携活動するためのプラットフォームです。


自走用

NA-NT2W

標準仕様
重量：15.2kg



折りたたみ時

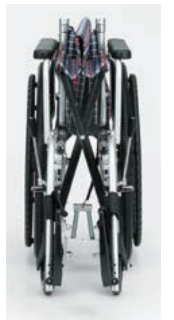

車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式

車いす移動車の固定装置が車いすのアンカーバーを自動的にホールド。複雑な固定手順が不要です。



※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例

簡単 便利

車椅子簡易固定システム
対応アンカーバー



※写真の車両はトヨタ自動車(株)の一例

車載フック



ワンタッチ固定式ではない、
従来のワイヤーフック固定式の
車いす移動車にも乗降できます。

※フレームにはフック固定位置を
示すマークがついています。

自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす

自走用

NA-NT2W

TAIS:00175-000428

耐100kg 166,000円(非課税)




開 ノーパンク 補装具車椅子 レディメイド

フットサポート・シート間距離調節式 34・36・38cm



■跳ね上げ式アームサポート。■開き式・着脱式フット・レッグサポート。

■車いす寸法

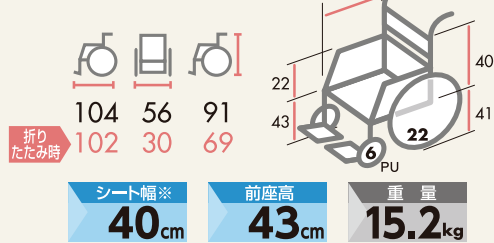

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※車輪径の単位はインチ、重量の単位はkg、その他の数値の単位はcmです。

介助用

NAH-NT2W

TAIS:00175-000429

耐100kg 166,000円(非課税)




開 ノーパンク 補装具車椅子 レディメイド

フットサポート・シート間距離調節式 34・36・38cm



■跳ね上げ式アームサポート。■開き式・着脱式フット・レッグサポート。

■車いす寸法

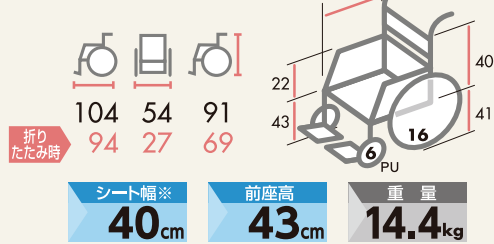

※シート幅はアームサポートパイプ内々の寸法です。
※車輪径の単位はインチ、重量の単位はkg、その他の数値の単位はcmです。

サイドガード

車いす移動車のシートベルトを通すための穴が開いています。



サイドガードの穴を通すことによりシートベルトを腰部に適切にかけることができます。



自走用のNA-NT2Wでも、サイドガードの穴と隙間の広いブラホイールを通してシートベルトを適切かつ容易に装着できます。

オプション



着脱式ヘッドサポート
新車注文時
10,750円(非課税)

ヘッドサポート高: 63~84cm
重量: 未装着車いすより1.1kg増加



ヘッドサポート高は、ノボルト調整式です。



ヘッドサポートが不要な場合は簡単にはずすことができます。

着脱式ヘッドサポートつきオプション仕様のTAISコード

- NA-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000430
- NAH-NT2W ヘッドサポートつき: 00175-000431